


# DENTAL-AID

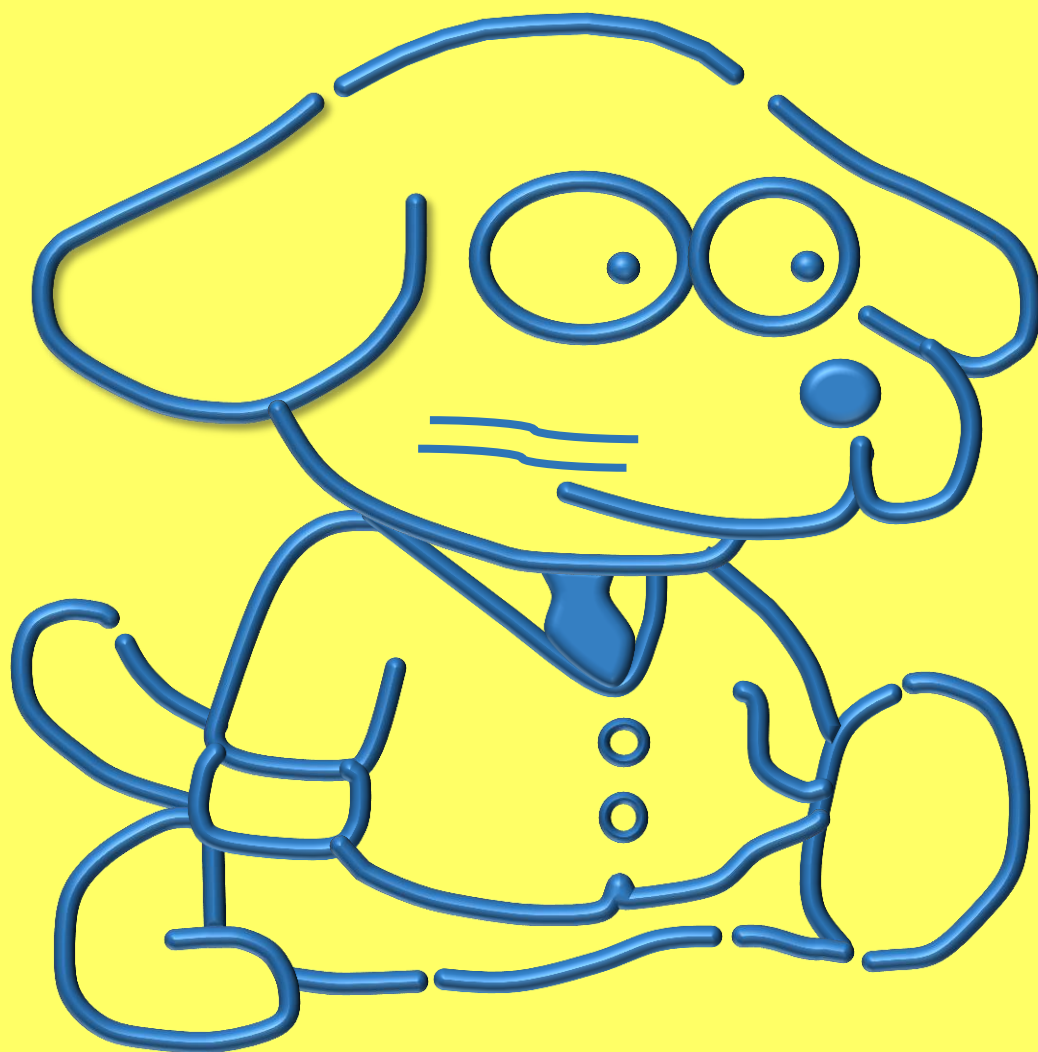

# CATALOG

**2022ver1**

**デンタルエイド株式会社**

〒662-0005 兵庫県西宮市湯元町 2-1

TEL : 0798-70-5883 FAX : 0798-70-5884

ご注文専用 FAX 0120-32-0274

URL : <http://www.dentalaid.co.jp/>

デンタルエイド

検索

# 目次

## 研削材・研磨材

デンチャー研磨スペシャルセット	3
ソフトポル・ハード／ソフトポル・ソフト	3
ソフトポル・ポイント	3
カラーホイール（ブラウン・ピンク・グリーン・ホワイト）	4
フェルトホイール（イエロー・グリーン）	4
テクノポリッシャー	5
テクノシリンダー	5
イーポリッシャー（シリコンポイント）	6
ペンポイント	6
KENDA クイーンポリッシャー	6
ロビンソンブラシ・ミニ／ロビンソンブラシ	7
ブラックチタンカッティングディスク（BTCD） -金属用-	7
セラミックカッティングディスク（CCD） -セラミック用-	7
レッドカッターディスク（RCD） -金属用-	8
キンパラカッター -金属用-	8
EVE ファイバーカット -金属用、セラミック用、ジルコニア用-	9
エイド ポリディスク	9
エイド ペーパーディスク	9
AQカーバイドバー	10
EVE ジルコニア研磨キット	10
エイド ジルコニア研磨セット	10
モデルトリミングディスク（MTD） -トリマー替刃-	11
MTDダイヤ -トリマー替刃-	11
ノンクロン	12
ホワイトルージュ	12

## ワックス類

藍ラインワックス	12
エイド ロールワックス	13
エイド パターンワックス	13

## シリコン製品&リング

シリコンボクシングフォーマー	14
ベースフォーマー	14
シリコンラボマット	14
ブルーフォーマー -铸造用円錐台-	15
ステンレスリング	15
プラスチックリング／シリコンフォーマー・ブラック	16

## セップ類

マイセップ -ワックス分離材-	16
マイスプレー、マイスプレー300 -表面活性剤-	16
ジップセップ -石膏・石膏分離材-	17
マイレジン -レジン分離材-	17
石膏表面硬化液	17

## マンドレル類

ソフトボル ビッグマン ー頭部の大きなマンドレルー	18
マンドレル (標準タイプ)	18

## メタル

シーピーアロイ 350 / シーピーアロイ 400 / シーピーアロイ 450 ー歯科鑄造用コバルトクロム合金ー	18
---	----

## その他

高周波鑄造るつぼ (ユニーク型)	19
FGアダプター・レギュラー / ロング / コントラ用	19
ダウエルピン NO. 3	20
ダウエルピンW	20
クリーンアップG ーキンパラクリーナーー	20

## 機械類

デムコ高速レーズ E-96LED	21
LS200スピンドル (デムコ高速レーズ用)	21
ボックストリマーⅢ ードライトリマー	22
ダストーンⅠ (サイクロン内蔵小型バキューム)	23
坪田式ラッセルエイド (レーズタケノコ調整器)	23

## PTD製品

PTD・リムフォーム	24
PTD・プラスチックサベヤー	24
PTD・メタルトレイ	24
PTD・オクルーザルハンドプレート	24
PTD・キャストボックス	25
PTD・トライアングルガイド	25
PTD・チェックカード	25
PTD・ちょこっとラボマット	25



# 研削材・研磨材

## デンチャー研磨スペシャルセット



アクリック・レジンの手軽な再光沢研磨法！！  
美しく光沢研磨されたアクリック・レジ床も、調整の段階で光沢が失われてしまいます。元の光沢に戻すには、なかなか手間のかかる作業です。これを手軽におこなっていただけます。各種研磨剤を含浸していますので、何もつけずに使用できます。

内容：ソフトポール（ハード／ソフト）×各3枚  
カラーホイール（ブラウン／ピンク）×各3枚、  
ソフトポール・ビッグマン（ラージヘッドマンドレル）×4本

標準小売価格：¥4,000（1セット）

一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット 28B3X0004000009

### 作業例《作業手順》 最高使用回転数6000 (rpm)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
カーバイトバー、スタンブアー等で削合調整を行う。	ソフト・ポールハードで軽く深い傷を取ります。	ソフト・ポールソフトでソフト・ポールハードの傷を取ります。傷が浅い場合はここからでも良い。	カラーホイールブラウンでソフト・ポールソフトの傷を取ります。やや光沢がでます。	カラーホイールピンクで光沢研磨を行います。美しい光沢がでます。	超音波洗浄器等で洗浄すれば完成です。

## ソフトポール・ハード / ソフトポール・ソフト / ソフトポール・ポイント



アクリックレジンの中研磨がとてもスピーディで、作業時間が短縮できます。ビッグポイント、ペーパーコンの代わりにお使いください。1枚でフルデンチャー10床程度研磨できるほどの耐久性があり、コストも大幅削減できます。低速回転（6,000～10,000rpm）で使用するのがコツです。アクリックレジンの場合は、ソフトポール・ハードのみでOK。ポリカーボネート樹脂の場合は、ハードでついた傷がソフトできれいに落ちます。

サイズ：直径25mm×厚さ約5mm

標準小売価格：¥2,300（12枚入） ¥10,350（60枚入）

\* 商品に写真のマンドレルは付いておりません



ソフトポールをビッグポイント型に成型しました。使用方法は、ソフトポールと同じです。

低速回転（10,000回転以下）でご使用ください。

サイズ：直径11mm×長さ25mm

標準小売価格：¥5,000（5本入）

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X0004000004

## カラーホイール(ブラウン・ピンク・グリーン・ホワイト)



不織布に各種研磨剤を含浸させています。研磨剤を使用せずこのままで研磨作業ができます。

◇ブラウン…レジン、貴金属合金の傷取り研磨

◇ピンク…レジンのつや出し

◇グリーン…貴金属合金のつや出し

◇ホワイト…研磨剤を含浸させていませんので、お好きな研磨材をつけてお使いください

サイズ:直径 22mm×3~5mm

標準小売価格 : ¥2,300(12枚入)

\* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X0004000005

## フェルトホイール(イエロー・グリーン)



フェルトに各種研磨剤を含浸させています。研磨剤を使用せずこのままでつや出しができます。

◇イエロー…各種レジン(硬質レジン、ポリカーボネイト等)

◇グリーン…各種金属(硬質金属)のつや出し

サイズ:直径 22mm×5mm


標準小売価格 : ¥2,300(12枚入)

\* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X0004000006



## テクノポリッシャー

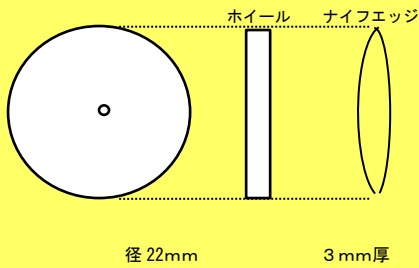

ソフトタイプのシリコンゴム製研磨材。  
やわらかいタッチで研磨でき、研磨カスが少ない。  
貴金属合金、コバルトクロム合金、レジン、セラミック等用途に応じて、各種あります。  
形状は、ホイールとナイフエッジの2種類があります。  
6W(ホワイト)が一番人気です。

カラー	型番		用途
	ホイール	ナイフエッジ	
ブラック	1W	1N	貴金属合金、硬質金属の中荒研磨用
ブラウン	2W	2N	貴金属合金、硬質金属の中研磨用
ライトグリーン	3W	3N	貴金属合金の細研磨用
ホワイト	6W	6N	陶材、貴金属合金、硬質金属の中研磨用
パープル	7W	7N	陶材、貴金属合金の細研磨用
モスグリーン	9W	9N	貴金属合金、硬質金属の中研磨用

サイズ：直径 22mm × 厚さ 3mm

標準小売価格 ¥2,300(20枚入) / ¥9,900(100枚入)

\*商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X0004000019

## テクノシリンダー



テクノポリッシャーのシリンダー型です。  
シリンダー型で使用するため、テクノポリッシャーより硬い材質に変えています。(そのため若干タッチが違います)  
金属、セラミックの研磨用。  
#7C は、未焼結ジルコニア滑沢研磨に使えます。(焼結前に軽くあてておくと、表面がきれいに仕上がります。)  
サイズ：直径7mm × 長さ24mm

型番	色	目の粗さ
6C	ホワイト	中
7C	ピンク	中細

標準小売価格：8,000円(100個入+スクリーマンドレル2本付)/2,000円(20個入+スクリーマンドレル1本付)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X0004000054

## シリコンポリッシャー


近日ご案内予定

準備中

標準小売価格：

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X0004000055

## イーポリッシャー(シリコンポイント) #706 / #704

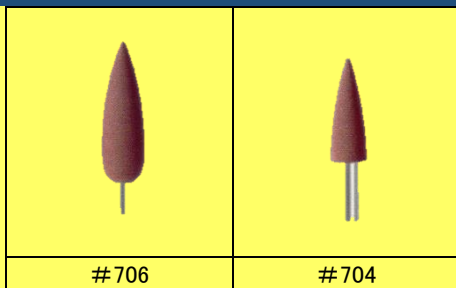

先端が細くとがった形状になっているため、トリミングの手間なく、咬合面溝の研磨等に使えます(#706、#704)。  
耐久性が良く、とがった形状のまま、とても長く使えます。

品名	サイズ(HP用)
#706	直径 5.2mm × 長さ 18.5mm
#704	直径 4.3mm × 長さ 12.5mm

標準小売価格 : ¥4,800(25 本入) ¥16,000(100 本入)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000036

## ペンポイント



専用のアダプターに取り付けて使うタイプのシリコンポイント。

サイズ: 直径 3mm × 長さ 20mm

カラー	型番	用途
ブラック	1P	貴金属合金、レジンの中研磨(2P より少し粗い)
ブラウン	2P	貴金属合金、レジンの中研磨

標準小売価格 : ¥2,300(20 本入) ¥9,900(100 本入) ¥2,300(12 本入+ペンポイントアダプター1 本)  
¥1,700(ペンポイントアダプター2 本入)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000020

## KENDA クイーンポリッシャー



デンチャー研磨用のビッグポイント。  
目が少し細かめでやわらかいシリコンポイントです。

低速回転(10,000rpm 以下)でご使用ください。

サイズ: 直径 9.8mm × 長さ 25mm

色: グレー FB

標準小売価格: ¥12,500(25 本入) ¥3,600(6 本入)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000040

## ロビンソンブラシ・ミニ / ロビンソンブラシ



ミニタイプは、金属部分が 6mmと小さいため、細部の研磨にとっても便利です。  
毛の硬さは、すべてソフトタイプのみになります。

品名	外径(mm)	標準小売価格
ミニ	10.5	¥1,500(12本入)
9S	15	¥1,200(12本入)
11S	18	¥1,200(12本入)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X0004000022

## ブラックチタンカッティングディスク(略称 BTCD) —金属用—



### 金属専用のカッティングディスク

貴金属合金から、コバルトクロム合金、チタン合金等、さまざまな金属の切断、研削にお使いいただけます。

大粒の研磨材(80メッシュ)を配合しているため、切れ味鋭く、またガラスファイバー繊維を練りこんでいるため、割れにくいです。

セラミック、レジン、ジルコニア等には、使用不可。


セラミック、レジン等には専用のセラミックカッティングディスク、ジルコニアには、EVE ファイバーカットを使用ください。

品名	サイズ(mm)	入数(枚)	標準小売価格
タイプ 1	直径 39 × 厚 0.7	25	¥3,000
		100	¥11,000
タイプ 2	直径 39 × 厚 1.4	15	¥2,200
		60	¥8,000
タイプ 0.4	直径 22 × 厚 0.4	25	¥2,000
		100	¥7,200
タイプ 0.6	直径 22 × 厚 0.6	25	¥2,000
		100	¥7,200
タイプ 1.2	直径 22 × 厚 1.2	25	¥2,200
		100	¥8,000
タイプ 1.8	直径 22 × 厚 1.8	25	¥2,200
		100	¥8,000
タイプ 2.2	直径 22 × 厚 2.2	25	¥2,200
		100	¥8,000

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X0004000002

\*商品に写真のマンドレルは付いておりません

## セラミックカッティングディスク(略称 CCD) —セラミック用—

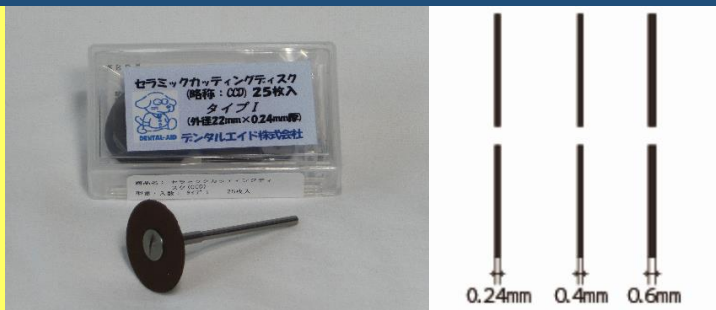

極薄ディスクにセラミック専用の大粒の研磨剤(120メッシュ)を配合しているため、切れ味が良いです。

セラミックの切断、研削に使いやすいです。

硬質レジン、各種金属の切断、研削プレスセラミックにも使えます。

品名	サイズ(mm)	入数(枚)	標準小売価格
タイプ I	直径 22 × 厚 0.24	25	¥3,000
タイプ II	直径 22 × 厚 0.4	25	¥2,200
タイプ III	直径 22 × 厚 0.6	25	¥2,200

ジルコニアの切削には使用不可。

ジルコニアの切削には EVE ファイバーカット(9ページ)をご使用ください。

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X0004000003

\*商品に写真のマンドレルは付いておりません



## レッドカッターディスク(略称 RCD) —金属専用—



貴金属合金、硬質金属(コバルトクロム系、ニッケルクロム系、チタン系)の切断や床辺線の研削にご利用ください。

品名	サイズ(mm)	入数(枚)	標準小売価格
#3807	直径 38 × 厚 0.7	25	¥2,100
		100	¥7,100
#3814	直径 38 × 厚 1.4	15	¥1,500
		60	¥5,100
#3005	直径 30 × 厚 0.5	25	¥1,900
		100	¥6,500
#2504	直径 25 × 厚 0.4	25	¥1,800
		100	¥6,100
#2230	直径 22 × 厚 3.0	25	¥1,900
		100	¥6,500


注)セラミックは研削できません。

<参考>

0.6mm厚、1.2mm厚、1.8mm厚、2.2mm厚のディスクをお探しの場合は、ブラックチタンカッティングディスク(BTCD)をご用意しております。


(外径は 22mm のみ)

\* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

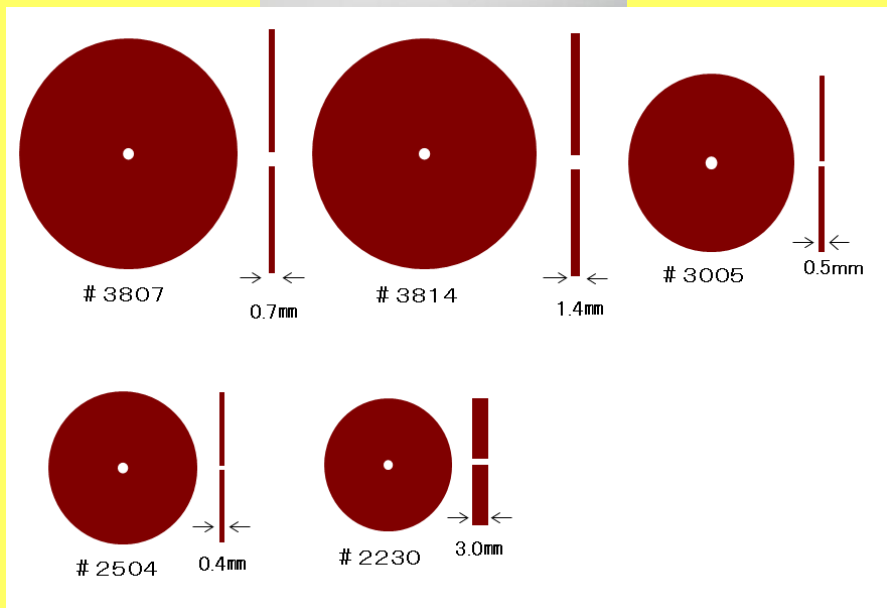

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X0004000011

## キンバラカッター —金属専用—

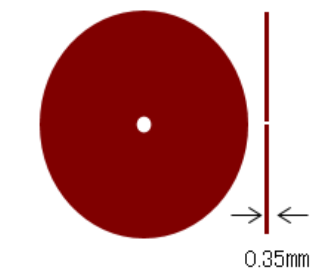

外径25mm×厚さ0.35mm  
50枚入 ¥3,000

貴金属合金、硬質金属(コバルトクロム系、ニッケルクロム系、チタン系)の切断や床辺線の研削にご利用ください。

ディスク厚 0.35mmと薄く、特にキンバラ等の貴金属に使用しますと金属の損耗が少なくて済みます。

標準小売価格 : ¥3,000(50枚入)

\* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X0004000012

## EVE ファイバーカット



網目状のファイバー入りですので、割れることが少なく安全です。  
 セラミック: セラミックの変色がなく、プレスセラミックにも使用できます。  
 ダイヤ: ダイヤモンド粒子配合で、ジルコニアの切削に使えます。  
 型番の数字は、直径/厚さ

型番・サイズ(mm)	入数	定価	用途
メタル FCA22/02	10 枚入	2,400	金属用
	100 枚入	22,800	
メタル FCA22/03	10 枚入	2,400	
	100 枚入	22,800	
メタル FCA40/05	10 枚入	3,500	セラミック用 (ポーセレン、 ニケイ酸リチウム 等)
	100 枚入	33,250	
セラミック FCS22/02	10 枚入	3,500	
	100 枚入	33,250	
セラミック FCS22/03	10 枚入	3,500	
	100 枚入	33,250	
セラミック FCS25/02	10 枚入	3,800	
	100 枚入	36,100	
ダイヤモンド FCD20/02	1 枚入	700	ジルコニア用
	10 枚入	5,200	
ダイヤモンド FCD20/03	1 枚入	700	
	10 枚入	5,200	

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X00040000047

## エイド ポリディスク



厚さ 0.3mm の極薄ディスクで、片面のみ 80 ミクロンの研削粒子が付いています。  
 ポリフィルム製のため、ペーパーディスクに比べ、コシが強く耐久性にも優れています。  
 レジン床とクラस्पの間隙の研磨、硬質レジンと隣接メタル間隙の研磨等に便利です。

サイズ: 直径 25mm × 厚さ 0.3mm

低速回転(10,000rpm 以下)でご使用ください。

標準小売価格 : ¥2,400 (50 枚入) \* 50 枚入商品には写真のマンドレルは付いておりません

スターターキット ¥800 (10 枚入、マンドレル 1 本付)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000041

## エイド ペーパーディスク



ペーパーの片面にシリコンカーバイドの研磨粒子が付いています。  
 エイド・ポリディスクより、目が粗いです。  
 プロビジョナルレストレーション研磨用ペーパーディスクとして、  
 ご依頼を受け製作いたしました。

型番	目の粗さ
#120	荒目
#180	中目

サイズ: 直径 22mm × 厚さ約 0.5mm

低速回転(10,000rpm 以下)でご使用ください。

標準小売価格 : ¥3,000 (50 枚入) \* 50 枚入商品には写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000201

## AQ カーバイドバー



切れ味の良いカーバイドバー。  
ラウンド(少し楕円形)タイプとフィッシャータイプがあります。

### ラウンドタイプ

型番	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	8	10
横径 (mm)	0.45	0.6	0.7	0.85	1.1	1.3	1.4	1.6	2.1	2.5

### フィッシャータイプ

型番	699	700	701	702	703	699L	700L	701L	702L	703L
横径 先端 (mm)	0.5	0.65	0.75	1.0	1.4	0.5	0.65	0.75	1.0	1.4
横径 根元 (mm)	0.8	1.0	1.1	1.4	1.75	0.8	1.0	1.1	1.4	1.75
長さ (mm)	3.8~3.9					5.5~5.6				

標準小売価格 : ¥2,500(5本入)

一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 28B3X0004000013

## EVE ジルコニア研磨キット



ダイヤモンドを配合したジルコニア研磨用ポイント9種を組み合わせたキット。  
何もつけずに、スピーディに形態修正からつや出しまでできます。  
ダイヤモンドプラス3形態:ジルコニア、ポーセレンの形態修正、研削に。

ダイヤモンドセラ(中目)3形態 : ジルコニアの中細研磨  
ダイヤモンドセラ(細目)3形態 : ジルコニアのつや出し

品名	ダイヤモンドプラス(荒)			ダイヤモンドセラ(中)			ダイヤモンドセラ(細)		
形状									
型番	DYP-8G	DYP-13G	DYP-14G	SL20DC	H2DC	H8DC	SL20DC	H2DC	H8DC
サイズ	径12×2	径4×10	径5×13	径20×1	径4×13	径11×2	径20×1	径4×13	径11×2

標準小売価格 : 1セット¥16,500

一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット 28B3X0004000043

## エイド ジルコニア研磨セット(3本入) / エイド ジルコニアポリッシャー(単品)



ジルコニア研削、研磨用のポイントです。  
ダイヤモンド粒子を含有させているので、何もつけずにスピーディに形態修正、つや出しができます。

型番	リングの色	用途
Z1	グリーン	研削
Z13P	レッド	中研磨
Z13Y	イエロー	つや出し

標準小売価格 : ¥6,000(3本入) 単品各¥2,200

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X0004000052(セット) / 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X0004000053(単品)

## モデルトリミングディスク(略称 M.T.D)

## —トリマー替刃—



今、お使いの各社トリマーに適合する替刃を揃えております。  
初めて使用するときはスターターセットを、次回から替刃セットです。  
目の粗さも種々取り揃えております。  
裏表両面を使用できますので、気持ち良く削れる期間が長いです。

### 〈規格(スターターセット・替刃セット共)〉

標準目(黒色、円周黄色)・荒目(黒色、円周青色) ・極荒目(黒色) の3種	
モリタ用	外径 230×穴径 19mm
ヨシダ用	外径 230×穴径 19mm
シロクス用(サンキン、東産)	外径 230×穴径 22mm
旧ヨシダ用(大径)	外径 250×穴径 19mm
大栄用	外径 205×穴径 13mm
レイフォスター用	外径 250×穴径 25mm

### 〈セット内容〉

スターターセット・・・取り付け具一式(補強板、ワッシャー)、替刃 2枚
替刃セット・・・替刃のみ 3枚

注)初めてご使用する方はスターターセットでないと取付できません。  
ご注文時は、メーカー名、目の粗さ、スターターか替刃かの3点をお知らせください。

標準小売価格 : ¥12,300 (スターターセット・替刃セット共)

一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 28B3X0004000001

## MTDダイヤ

## —トリマー替刃—



今、お使いの各社トリマーに適合するダイヤ替刃を、取り揃えております。  
ダイヤパターンは、円形。

標準(黄色)・荒(青色) の2種	
モリタ、ヨシダ用	外径 230×穴径 19mm
シロクス、サンキン用	外径 230×穴径 22mm
大径(250mm)	外径 250×穴径 25mm

標準小売価格 : ¥39,800

¥49,600(大径・標準目)

¥54,400(大径・荒目)

一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材 28B3X0004000010



### 【参考】

モデルトリミングディスク、MTDダイヤは、  
当社ボックストリマー(乾式トリマー)に使用できます。

※ボックストリマーは P.22 に掲載しています。



## ハンクロン



金属、レジンの鏡面光沢研磨用ルーージュ  
バフやブラシに塗布して、使用します。

酸化クロムを含まず、結合材の油脂分も少なく、  
洗浄が楽です。

標準小売価格： ¥2,500 (300g)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000025

## ホワイトルーージュ



金属、レジンの中研磨用ルーージュ  
バフやブラシに塗布して、使用します。

硬質金属の研磨は、小さな傷が取りづらく大変です。  
最終研磨の前段階で使用すると、最終研磨が楽になります。

標準小売価格： ¥2,000 (380g)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000024

## ワックス類

### 藍ラインワックス



柔軟性のあるワックスのため、曲げた時の破損が少ない。  
クラスプ、バー、スプール線等に幅広く使用できます。

廃業された林歯科商店「ビニールラインワックス」と同一材質です。

	型番	サイズ(mm)	入数	用途
丸	R0.8	直径 0.8	100	金属床のレジ持線及びびべント
	R1.0	直径 1.0	100	
	R1.4	直径 1.4	100	
	R2.0	直径 2.0	100	クラウン、ブリッジ、 インレーのスプール線
	R3.0	直径 3.0	25	金属床のスプール線
	R4.0	直径 4.0	25	
半円	HR1.4	幅 1.4×高さ 1.0	100	クラスプ
	HR1.6	幅 1.6×高さ 1.1	100	
	HR1.8	幅 1.8×高さ 1.1	100	
	HR2.0	幅 2.0×高さ 1.2	100	

長さは、全種類 20cm。

標準小売価格： ¥1,400

一般医療機器・歯科用キャスティングワックス 28B3X00040000032



## エイド ロールワックス



金属鑄造時のスプール線として圧入式レジン床製作時のスプール線等に使用できます。  
ロールタイプですので、無駄なく使えます。  
融点:59±1℃。


直径	2.0 mm、2.5 mm、3.0 mm、 3.5 mm、4.0 mm、5.0 mm
色調	グリーン
硬さ	ミディアム
内容量	250g

標準小売価格 : ¥3,200 (250g)

一般医療機器 歯科用キャストワックス 28BX0004000038

## エイド パターンワックス

クラスプ、バー、床等の鑄造ろう型を作製するために用いる。

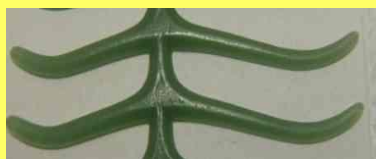

← 15mm → ← 20mm →

大臼歯用クラスプLB/LC


厚さ:1.3 mm 10シート入

(LCのほうがほんの少し厚いです)




リテンション(ラウンド)R23

サイズ:70×70 mm 厚さ:0.8 mm 穴径:2.3 mm  
20シート入

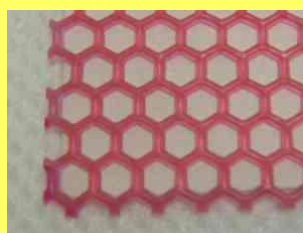

リテンション(ヘキサゴン)

サイズ:70×70 mm 厚さ:0.8 mm 20シート入

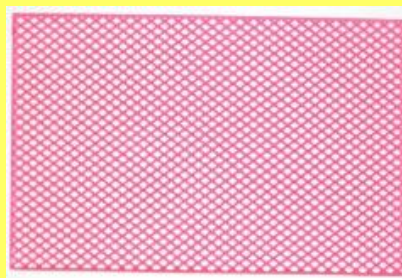

リテンション(グリッド)

サイズ:78×152 mm 厚さ:0.8 mm  
10シート入



ステップシート(ファイン)0.35/0.40/0.45

サイズ:75×150 mm 厚さ:0.35 mm、0.40 mm、0.45 mm


15シート入

標準小売価格 : ¥3,000 (各種)

一般医療機器 歯科用ワックス整形品 28BX0004000037

# シリコン製品 & リング

## シリコン・ボクシングフォーマー

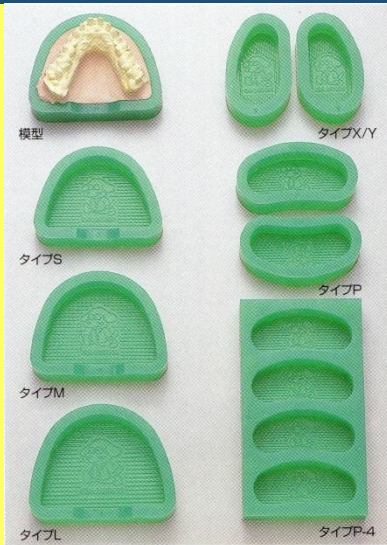

上質のシリコンゴムを使用していますので離型性および耐久性に優れ、またベロ部がありませんので、どのような模型にも使用できます。他社製品よりもワンサイズ大きめです。

	品名	幅 (mm)	高さ (mm)	深さ (mm)	入数	標準小売価格
全 顎 用	タイプS	75	53	16.5	1個	¥2,600
	タイプM	80	59	16.5	1個	¥2,600
	タイプL	85	65	16.5	1個	¥2,600
片 顎 用	タイプX/Y	31	61	16.5	1組	¥3,000
	タイプP	71	31	16.5	2個	¥3,000
	タイプP-4	71	31	16.5	1個	¥5,500

※サイズは全て内寸です。

雑品

## ベースフォーマー

材質:シリコンラバー 用途:全顎模型の基礎床等



全顎模型の基礎床等

品質の良いシリコンゴム製のため、耐用年数が長く、劣化して硬くなったり、ひび割れたりしません。後方が高くなっています。

現在は、ブルーに変更になっています。

上顎用	幅 85 mm/長さ 69 mm/前方高さ 8 mm 後方高さ 25 mm
下顎用	幅 92 mm/長さ 72 mm/前方高さ 12 mm 後方高さ 30 mm

標準小売価格 : ¥5,000(上下セット)

雑品

## シリコンラボマット



品質の良いシリコン製の技工作業用デスクマット。

耐熱性、耐アルカリ性、耐熱 280°C。

赤熱したスパチュラ等がふれても焼けません。

付着した溶解ワックスも固まれば簡単にとれます。

5mm厚で弾力性があり、製作物及び技工器具にソフトです。

グリーンとブラックがあります。


サイズ:縦 385 mm×横 475 mm×厚み 5 mm

重さ:1kg

標準小売価格 : ¥7,500(グリーン、ブラック共)

雑品

## ブルーフォーマー - 鑄造用円錐台 -

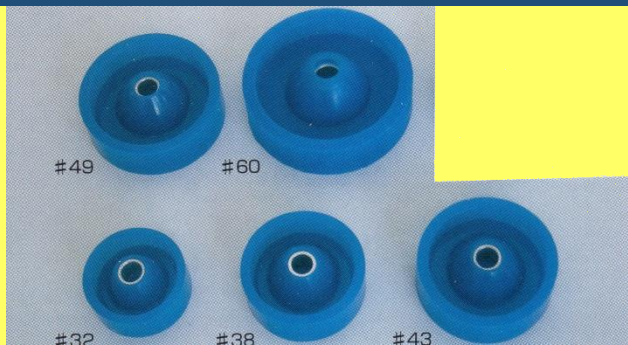


品質の良いシリコンゴム製のため、耐用年数が長く、劣化して硬くなったり、ひび割れたりしません。  
付着した埋没材も、こびりつかずに取れやすい。

型番	適応リング	標準小売価格
#32	リング外径 32 mm	¥ 900
#38	リング外径 38 mm	¥ 1,000
#43	リング外径 43 mm	¥ 1,100
#49	リング外径 49 mm	¥ 1,200
#60	リング外径 60 mm	¥ 1,600

雑品

## ステンレスリング

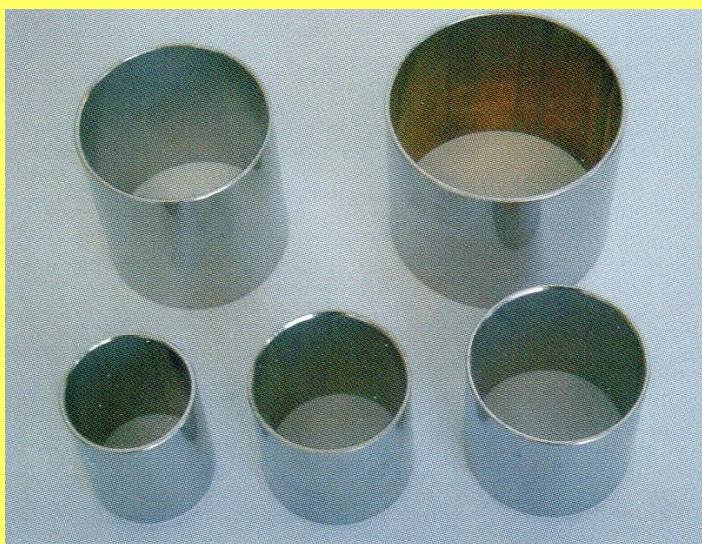

鑄造に使用するステンレスリング。1個単位での販売です。  
(特注リングは終了しました)

型番	外径	高さ	厚さ	標準小売価格
#32	32 mm	40 mm	1.5 mm	¥ 1,000
#38	38 mm	40 mm	1.5 mm	¥ 1,300
#43	43 mm	40 mm	1.5 mm	¥ 1,400
#49	49 mm	50 mm	1.5 mm	¥ 1,500
#60	60 mm	50 mm	1.5 mm	¥ 1,700
D1/34/50	34 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,200
D2/43/50	43 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,400
D3/60/50	60 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,600
D4/76/50	76 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 2,000
D5/43/60	43 mm	60 mm	2.0 mm	¥ 1,500
D6/60/65	60 mm	65 mm	2.0 mm	¥ 1,700
D7/76/70	76 mm	70 mm	2.0 mm	¥ 2,200
DT1/32/50	32 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,000
DT2/38/50	38 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,300
DT3/43/50	43 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,400
DT4/50/50	50 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,500
DT5/60/50	60 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,600
DT6/76/50	76 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 2,000
H1/30/55	30 mm	55 mm	1.5 mm	¥ 1,200
H3/48/55	48 mm	55 mm	1.5 mm	¥ 1,600

### ブルーフォーマー適合リング一覧表

外径	高さ	40mm	50mm	60mm	65mm
32mm		#32	DT1	—	—
38mm		#38	DT2	—	—
43mm		#43	D2	D5	—
49mm		—	#49	—	—
60mm		—	#60	—	D6

一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 28B3X00040000034



## プラスチックリング / シリコンフォーマー・ブラック



リングレス铸造用。  
両製品とも旧ユニーク社製品(製造中止)と同サイズです。  
材質は耐久性の高いシリコン製に改良です。

プラスチックリング(厚さ10mm、スリット入り)

型番	リング内径	リング高さ	標準小売価格
Φ100	90mm	70mm	¥3,000
Φ90	80mm	70mm	¥3,000
Φ80	70mm	60mm	¥3,000
Φ70	60mm	55mm	¥3,000

シリコンフォーマー・ブラック(プラスチックリング専用フォーマー)

型番	標準小売価格
ブラリング 100用	¥2,200
ブラリング 90用	¥2,200
ブラリング 80用	¥2,200
ブラリング 70用	¥2,200

雑品

## セップ類

### マイセップ —ワックス分離材—



ワックスアップ時の、石膏とワックスの分離材。  
アルコールベースの極薄膜のため、铸造物の適合性が向上します。  
詰替用の大容量タイプですので、お手持ちのガラス小瓶等に小分けしてお使いください。

標準小売価格 : ¥3,300(500ml)

雑品

### マイスプレー、マイスプレー300 —表面活性剤—



ワックスパターンの埋没時の表面活性剤。  
優れた表面活性効果により、铸造物の気泡発生や、鑄肌荒れを防止して、滑沢な铸造物がえられます。  
ボトルタイプは詰替用ですので、市販のスプレーボトル等に入れてご使用ください。

マイスプレー300は、缶入りスプレータイプですので、そのまま使えます。

標準小売価格 : マイスプレー ¥3,300(500ml)      マイスプレー300 ¥1,500

雑品

ジップセップ —石膏・石膏分離材—



石膏と石膏間の分離用。  
 ダウエルピン植立時の分割模型の分離、デンチャー埋没時の一次石膏と二次石膏の分離、咬合器と石膏の分離等に。  
 (注:加熱すると、分離効果が弱まりますので、フラスコと石膏の分離には適しません)

標準小売価格 : ¥3,300(500ml)

雑品

マイレジン —レジン分離材—




石膏と加熱重合レジンの分離用レジンセップ。  
 さらっとした液状タイプ。  
 石膏に塗布すると均一な被膜を形成し、一度の塗布で十分な分離効果をえられます。

標準小売価格 : ¥1,200(500ml入) ¥3,600 (2L 入) ¥28,000(18L 入)

雑品

石膏表面硬化液

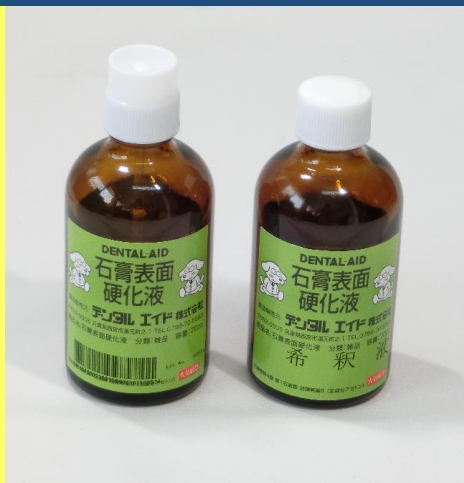

石膏模型表面に塗布すると、石膏内部にしみこんで硬化し、石膏表面の強度を高めます。  
 チッピングが少なくなり、水に対する石膏の再溶解を防止します。  
 極薄被膜のため、模型の制度に影響をあたえません。

蒸発して、粘度があがった場合は、別売の「石膏表面硬化液・希釈液」をご利用ください。

標準小売価格 : ¥1,700(70ml) 石膏表面硬化液専用希釈液 ¥1,000

雑品



# マンドレル類

## ソフトポル ビッグマン —ラージヘッドマンドレル—



ヘッド部直径8mmと大きいので、ソフトポルのような柔らかいスポンジ状ホイール使用時の空回り防止になります。また、薄型軽量ヘッドのため、バランスがくずれにくい。頭部の厚さが1.2mmと薄いので、極薄ディスクを装着し歯間部の作業性に優れています。ワッシャーをはさんでいないタイプのマンドレルです。

標準小売価格：¥2,400(6本入)

一般医療機器 歯科用マンドレル 28B3X0004000017

## マンドレル(標準タイプ)



ヘッド部が標準サイズの一般的に普及しているマンドレル。ホイールや、ディスク等を取り付けて使用します。

標準小売価格：¥2,000(12本入)

一般医療機器 歯科用マンドレル 28B3X0004000016

ペンポイントアダプター(2本入) ¥1,700 <5ページ参照> スクリューマンドレル(5本入) ¥2,000 <5ページ参照>

# メタル

## シーピーアロイ350/シーピーアロイ400/シーピーアロイ450 —歯科鑄造用コバルトクロム合金—



用途にあわせて、ビッカース硬度350Hv、400Hv、450Hvの3種類を用意しております。インゴットタイプ(6g円柱形、径9.4mm×高さ約10mm)とショットタイプがあります。

	CP-450	CP-400	CP-350
コバルト	60.7%	60.7%	61.2%
クロム	31.2%	31.3%	31.0%
モリブデン	6.0%	6.0%	6.0%
その他	2.1%	2.0%	1.8%
硬度(HV)	450	400	350

標準小売価格： ¥35,000(インゴット1kg入、6g片) ¥30,000(ショット1kg入)

管理医療機器 歯科鑄造用コバルトクロム合金 21900BZX00576000 (CP350) 21900BZX00578000 (CP400) 21900BZX00580000 (CP450)

# その他

## 高周波鑄造るつぼ(ユニーク型)




旧ユニーク社で販売していた高周波鑄造機用セラミックるつぼ  
日本製

型番	サイズ(mm)	適 応
A-1 型	φ41×H67	ユニーク高周波鑄造機(空冷式)等
B-1 型	φ41×H67	ユニーク高周波鑄造機(水冷式)等
V-7000 型	φ51×H67	ユニーク・スーパーarton等

標準小売価格 : A-1 型(12 個入)14,800 円 B-1 型(12 個入)14,800 円 V-7000 型(10 個入)23,000 円

雑品

## FGアダプター レギュラー / ロングタイプ / コントラ用

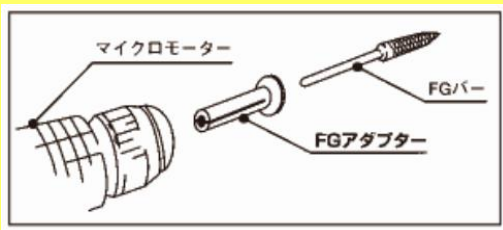

FGバーをHP用チャックにて使用することができます。

レギュラータイプは、チャックにすべて差し込んでしまう方式ですので、ブレが少なく、安定して使用できます。(一部チャックの奥で締め付けるタイプのハンドピースでは、使用できません)

ロングタイプ、コントラ用は、特殊設計のバネでアダプター先端にFGバーを取り付けます。  
(抜き差しの回数が多いと、寿命が短くなります)

サイズ・材質:レギュラー>長さ 14mm、真鍮  
ロング>長さ 34mm、ステンレス  
コントラ用>長さ 16mm、ステンレス



標準小売価格 : レギュラー¥2,400(5個入) ロングタイプ¥3,000(5個入) コントラ用¥3,000(5個入)

雑品

## ダウエルピン No. 3



亜鉛ダイキャスト製  
片面カット  
再利用はできません(使い捨てタイプ)

標準小売価格 : ¥4,500 (1,000 本入)

雑品

## ダウエルピンW



精密な技工模型の作成に必要な  
ツインピン。  
セット内容:ピン、ホルダー、ゴム×各 200

標準小売価格 : ¥5,000 (セット・200 組)

雑品

## クリーンアップG キンパラクリーナー



金合金・金パラ合金用の酸化膜除去剤。  
約3分間で金合金、金パラ合金の酸化膜除去が完了。  
塩酸などの強酸類を含まず、ガスの発生がありません。  
廃液処理が簡単。  
強力で長寿命。  
超音波法、浸漬法、カセロール加熱法にも、使用できます。

### <使用方法>

1. 粉末を、1リットルのぬるま湯に溶解します。
2. 約3分間で清掃が終了しますので、鑄造物をピンセットで取り出し、水洗してください。(3分間以上放置しても、差し支えありません)
3. 液は、効力が弱くなるまで、反復使用することができます。

標準小売価格 : ¥2,800 (150g粉末・1 リットル用)

雑品

## デムコ高速レーズ E-96 LED



大きなカッティングディスクでも、安定したトルクの切断、研削が可能。  
フリーチャック方式のため、スイッチオンのまま、研磨器具の交換が可能。  
バキューム接続口がありますので、粉じんの飛散が少なくなります。  
LEDライトのため、機械が熱くなりません。

回転数 28,000rpm(ハイ&ローのベルト交換による2段切替式)  
チャック径  $\Phi 2.35\text{mm}$   
サイズ 幅 26 cm × 奥行 32 cm × 高さ 28 cm  
重量 約 16kg  
電源 100V(115V への専用昇圧トランス付属)  
アメリカ CMP インダストリー社製

標準小売価格 : ¥250,000(セット)

¥125,000(デムコ純正スピンドル)

一般医療機器 歯科技工用高速レーズ 28B3X00040000080

## LS200スピンドル(デムコ高速レーズ用)



デムコ高速レーズに適合する互換スピンドル。

(注:チャックはデムコ純正品と互換性がありませんので、LS200 専用をお求めください)

LS200専用チャック ¥4,000

製造中止のサンキン・高速レーズに取り付けられます。詳細は、デンタルエイドのホームページを参照ください。

標準小売価格 : ¥66,000

一般医療機器 歯科技工用高速レーズ 28B3X00040000141



## ボックストリマーⅢ —ドライトリマー—



模型を濡らすことなく、乾式で研削できますので、模型の精度を保てます。

従来の水洗式トリマーに比べ、トラップ・排水管の配管トラブルがなくなります。

排水管に石膏、埋没材を流さないので環境にも優しい。水道への接続が不要ですので、場所を選ばず設置できます。

粒の大きな石膏くずは本体下部の引き出し部分に溜まるため、廃棄が楽です。バキュームにも負担が少ないです。

LEDライト付きですので作業部分が明るい。

バキューム用の専用コンセントがついておりますので、スイッチひとつで使用できます。

必ずセントラルバキュームもしくは、小型バキュームを接続してご使用ください。

AC100V・250W

サイズ : 35cm × 奥行 45cm × 高さ 50cm

重量 : 約25kg

出荷時には、モデルトリミングディスク・シロクス用荒目が取り付けられています。

※替刃には当社モデルトリミングディスク・シロクス用又は、MTD ダイヤ・シロクス用をご使用ください。モデルトリミングディスク、MTD ダイヤは P.13に掲載しております。

(即納できない場合もございますので、ご了承お願いいたします。)



替刃部分



本体下部の引き出し部分  
ここに大きな石膏くずが溜まります

標準小売価格 : ¥290,000

一般医療機器 歯科技工用トリマ 28B3X00040000035



## ダストン I (サイクロンセパレーター内蔵小型バキューム)



サイクロンセパレーターを内蔵した小型バキューム。  
吸気を回転させることにより、大部分の粉塵をダストボックスに回収できます。  
ダストボックスは、透明アクリル製のため、たまった粉塵量が簡単に確認できます。  
コンパクトな設計のため場所を取りません。  
2次フィルターに紙パックを併用していますので、モーターへの粉塵の侵入を軽減しています。  
コントローラーを本体から分離したため、手で電源オン/オフ、吸引量調整が簡単にできます。

AC100V・出力0～600W

サイズ:幅 20cm×奥行 45cm×高さ 50cm

標準小売価格 : ¥150,000

雑品

## 坪田式ラッセルエイド (レーズタケノコ調整器)



レーズでの研磨作業中にバフやブラシが空回りしたり、滑って脱落したりすることがあります。  
タケノコの溝が劣化する前に、調整すれば快適に長期間使用できます。  
本体はステンレス製  
ダイヤモンド刃は、0.3mm厚ステンレスにダイヤモンド電着(最終0.5mm厚)  
ダイヤモンド刃は、切れなくなるまで、何度でも使えます。  
切れなくなったら、ネジをゆるめて上下を入れ替えれば、再度使えます。

<使用方法>レーズを低速で回転させる。スイッチを切って惰性で回ってる時に、ダイヤモンド刃を軽く押し当てると、使いやすいです。

標準小売価格 : ¥3,600

¥1,800(替刃)

雑品

# PTD 製品

## PTD・リムフォーム




有歯顎と総義歯(人工歯)の分析により得られた標準規格の歯列弓と歯冠幅径・長径を再現した薄型のワックスリムを製作するためのシリコンゴム製のフォーマー。  
上下顎が1組で形成されるようになっています。

標準小売価格 : ¥5,000

雑品

## PTD・プラスチックサベヤー

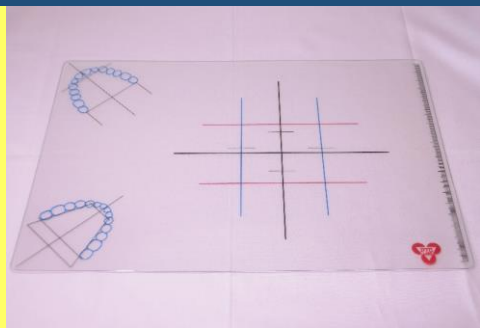


規格模型と咬合床を観察するために、規格模型の寸法が正中線と咬合平面と関連した基準線として透明シートに三色で印刷されています。  
上下顎の標準歯列も添えられており模型上のランドマークより人工歯配列位置のイメージアップが可能。  
(メタルトレイと併用します)

標準小売価格 : ¥3,500

雑品

## PTD・メタルトレイ

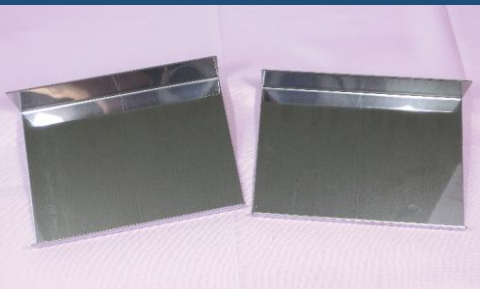

規格模型の既形ベースを石膏にて形成するために作られたステンレス製トレイ。

上顎用: 後方エッジ25mm、前方エッジ8mm  
下顎用: 後方エッジ30mm、前方エッジ12mm  
(プラスチックサベヤーと併用します)

標準小売価格 : ¥5,000(上下組)

雑品

## PTD・オクルーザルハンドプレート



ワックスリムの平面を加熱して形成するスパチュラ。  
人工歯配列時の基準面として使用するアルミ製の平面板。  
後方のエッジは5mm。

標準小売価格 : ¥5,500

雑品

## PTD・キャストボックス



ハンドル付トレーや義歯および咬合床などによる印象を少量のアルジネート印象材やソフトプラスターなどを用いて、確実にスピーディにボクシングをおこなうための、黄銅製の鋳造品。パテ状シリコン印象材を用いて、コピーデンチャーの型採りも正確に行うことができます。


		上	下
内径	大	88mm	80mm
	小	83mm	75mm

製造分完売いたしましたら、販売終了となる可能性がありますので、ご希望の方は、お早めにご注文お願いいたします。

標準小売価格 : ¥16,800 (上下各2サイズ、4個組)

雑品

## PTD・トライアングルガイド

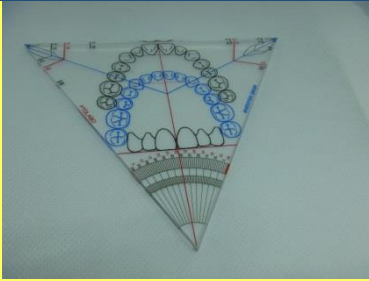


サイズ:底辺 12.5cm×高さ 11cm

標準小売価格 : ¥2,500

雑品

## PTD・チェックカード

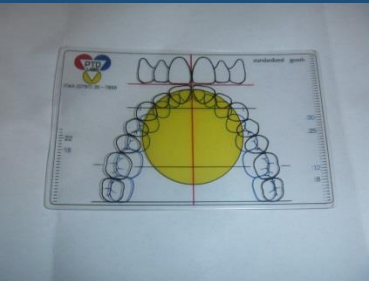

カードサイズ

標準小売価格 : ¥2,000

雑品

## PTD・ちよこっとラボマット



デンタルエイドで販売中のシリコンラボマットの 4 分の1サイズ。グリーンとブラックの2種類があります。

サイズ:縦 23.5cm×横 19cm

標準小売価格 : ¥3,800

雑品

その他、一部掲載のない製品につきましては、デンタルエイドのホームページをご覧ください。

デンタルエイド

検索



Twitter、Facebookでも順次情報発信中です。

デンタルエイド株式会社

設立：1987年7月

所属：日本歯科用品輸入協会

許認可：第三種医療機器製造販売業、  
医療機器製造業(一般)

医療機器修理業、高度管理医療機器販売業

※当カタログの価格は**2022年2月現在**のものです。

製品仕様、価格につきましては、予告なく変更することがございます。

Ver.202202