

電解水で歯科クリニックの感染対策をサポート

歯科ユニット 給水ライン・クリーンシステム

中性電解水

ポセイドン


添加物なし
水道水のみ
使用します

ユニット給水の
残留塩素濃度を
調整します*1

「中性」で
人と歯科ユニット
にやさしい*2

歯科ユニットの
水詰まりの解消
が期待できます*3

水道法上の
『給水器具』
として認証済

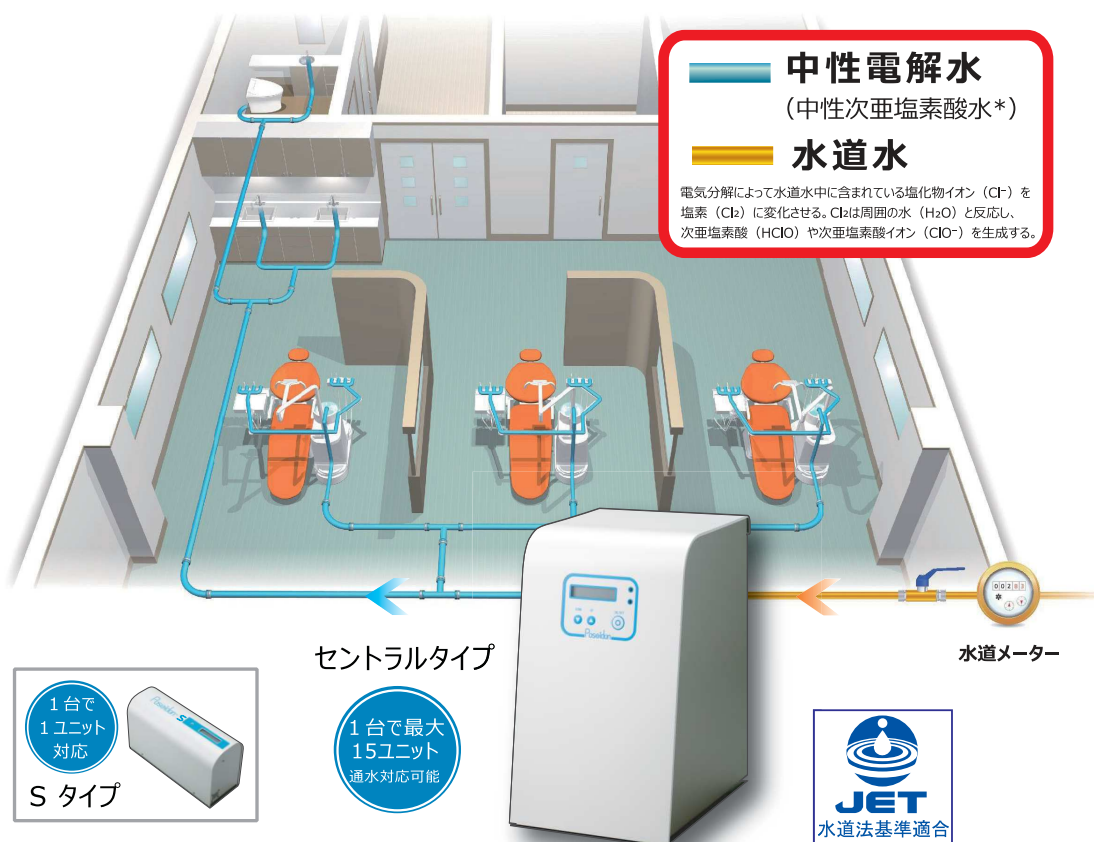

*1 本機の設置により、給水系の残留塩素濃度を $\sim 5\text{mg}/\ell$ の範囲で調整します。地域の水質により、残留塩素濃度には差が生じます。
*2 『ポセイドン』の生成水は、水道法第4条の規定に基づく、「水質基準に関する省令」で規定する「水質基準項目」と「基準値(51項目)」に適合しております。
*3 本機の設置により、水詰まりの解消を保障するものではありません。

電解型 次亜塩素酸水 生成器

EO-005
NEW 高濃度エディション

新型『EO-005』（高濃度エディション）は、電解型の強酸性次亜塩素酸水生成器であり、0.2%以下の塩化ナトリウム水溶液を陽極と陰極が隔膜で仕切られた電解槽内で電気分解することにより、陽極側に『次亜塩素酸（HClO）』を主生成成分とするpH2.7以下

有効塩素濃度 約35ppm～80ppm以上 の強酸性次亜塩素酸水と陰極側に、強アルカリ性（pH10.5～11.5）の電解アルカリ性機能水を連続的に同時生成できる機器です。



Self
Medical

株式会社 セルフメディカル

京都市下京区藤本寄町30番 四条黒田ビル5F
TEL (075) 744-0874 FAX (075) 744-0873

<http://selfmedical.jp/>
✉ info@selfmedical.jp

